

Aminopyridines

Column: **MEDITERRANEA SEA 18** 5 μ m, P/N TR-010004


Size: 150 mm x 4.6 mm ID

Mobile phase: CH₂OH / 20 mM KH₂PO₄ - K₂HPO₄ (pH = 7.0)
= 15 / 85

Flow rate: 1.0 mL/min

Temperature Column: 40°C

Detector: UV 254 nm

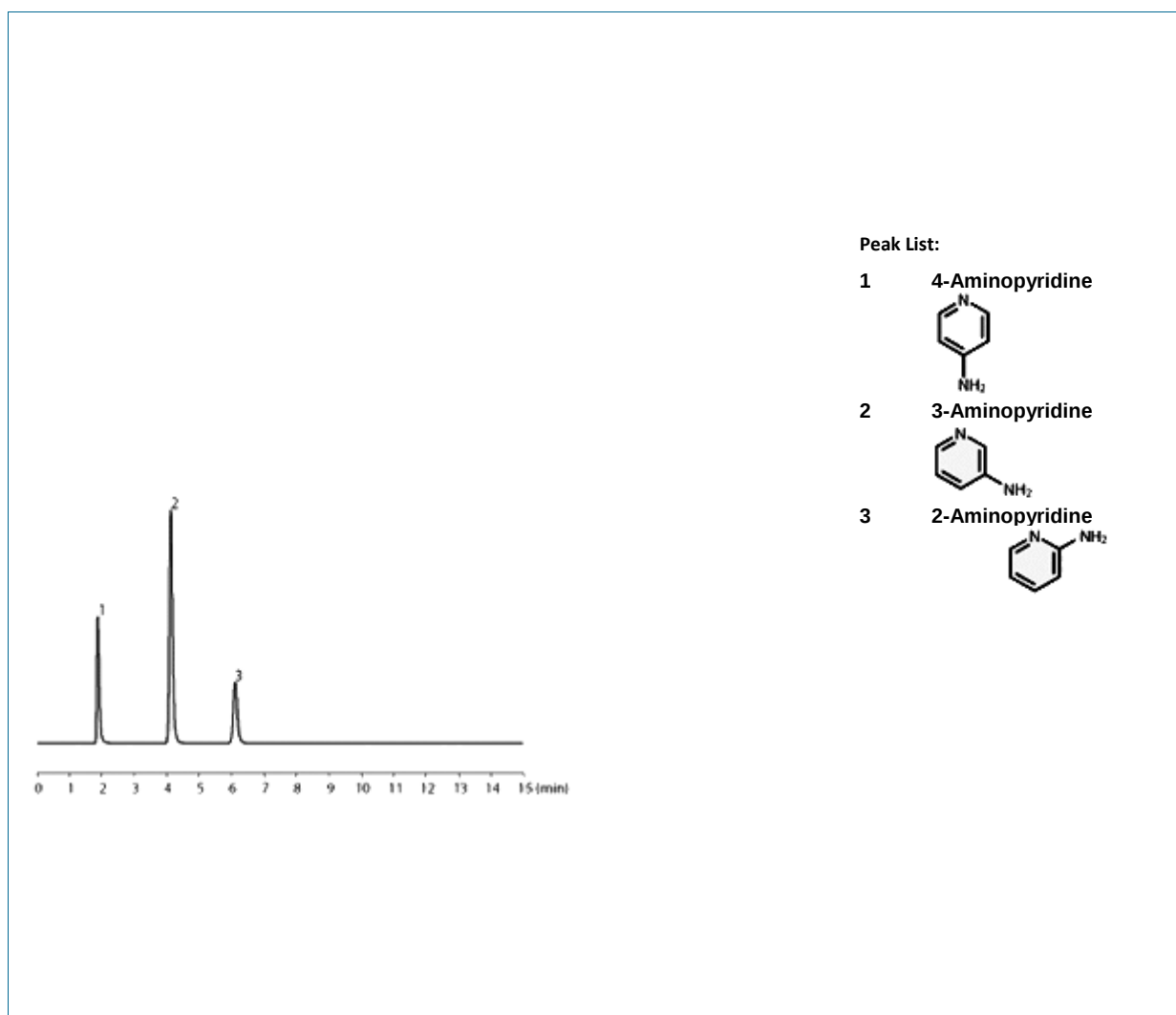

TKL 6004

www.teknokroma.com

Teknokroma S. Coop. C. Ltda. - Camí de Can Calders, 14 - 08173 Sant Cugat del Vallès
(Barcelona) Spain

Tel: +34) 936 748 800 Fax: +34) 936 752 405 e-mail: comercial@teknokroma.es