


Conector Litetouch

Sustituye con mucha ventaja a los conos tradicionales de acero. Manteniendo las especificaciones de presión de trabajo propias de los conos de acero, el sistema LiteTouch elimina totalmente los problemas de clavado irreversible de los de acero, lo cual los hace muy útiles para conexión de tubo de 1/16" a válvulas de inyección, sistemas de bombeo de alta presión, etc.

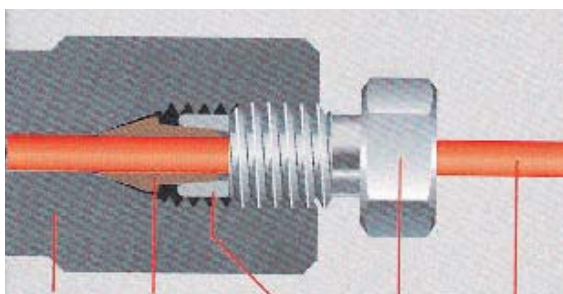

Conexión, unión o columna Cono de PEEK Anillo de compresión de acero Rosca estándar de acero Tubo

Para tubo de 1/6" OD


Referencia	Descripción
UP-LT-100x	Sistema cono (10 - pack) PEEK™ / Steel
UP-R-101x	Sistema cono (10 - pack) Aurum / Steel
UP-LT-110x	Conector PEEK, rosca 10-32 (10-pack)

Herramienta de desmontaje

Referencia	Descripción
UP-LT-300	Herramienta de desmontaje para conos Lite Touch

Conectores Super Flangeless

- Universal
- Elimina la necesidad de herramientas especiales
- Soporta presiones de 7000 psi con tubos de 1/16" OD.

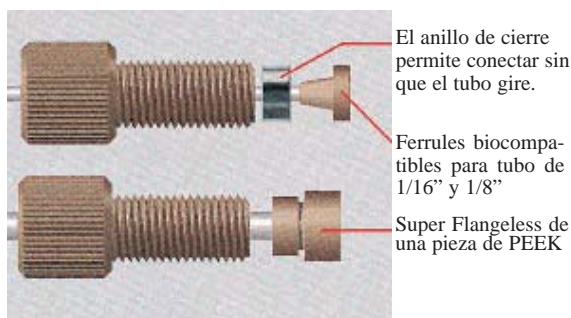

Para tubo 1/16" OD

Referencia	Descripción
UP-P-250x	Cono de PEEK™ con anillo de acero inoxidable (10 - Pack)
UP-P-260x	Cono de una pieza de PEEK™ con anillo (10 - Pack)
UP-P-252x	Delrin , rosca 1/ 4. 28 (10 - Pack)
UP-P-254x	Tefzel , rosca 1/ 4. 28 (10 - Pack)
UP-P-255x	PEEK™, rosca 1/ 4. 28 (10 - Pack)

Para tubo 1/18" OD

Referencia	Descripción
UP-P- 350x	Cono de PEEK™ con anillo de acero inoxidable (10 - Pack)
UP-P-360x	Cono de una pieza de PEEK™ con anillo (10 - Pack)
UP-P-331	PEEK™, rosca 1/ 4. 28